

パテラX 707N 取扱説明書

警告（この注意事項を守らないと、使用者が重傷を負うおそれがあります）


- 本装具は医師の処方のもと、義肢装具士が調整・適合確認しご使用いただく装具です。
- 本装具の使用に際しては医師の指示に従い、義肢装具士など医療従事者の十分な指導を受け、正しくご使用下さい。
- 本装具の使用により痛みやしびれ、かぶれ等の異常が生じた場合は使用を中止し、速やかに医師または義肢装具士に相談し、指示に従って下さい。
- 使用期間及び使用状況によって、縫製部分などが破損する場合があります。破損した場合はすぐに使用を中止して下さい。
- 本装具の加工、改造は絶対に行わないで下さい。
- ご本人以外のご使用はお止め下さい。

注意（この注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害のおそれがあります）

- 装着前に必ず本体、ベルト等に異常がないか確認して下さい。
- 装着の際は、上下、左右、表裏を確認し装着して下さい。
- ベルトは緩まないように装着して下さい。
- 使用中にずれ、緩みが生じた場合は必ず正しい位置に装着し直して下さい。
- 強くベルトを締めた状態で長時間使用されますと、痛みや血行障害を生じる恐れがあります。
- 皮膚が弱い方はシリコンパッド部でかぶれ等が生じることがあります。直接触れないようにするなどのご配慮をお願い致します。
- シリコンパッドは強く引っ張ったり、鋭利なものがあたると破損する恐れがあります。
- 常に乾燥させてご使用下さい。

装着方法（左膝の場合）

- 本装具の上下、左右、表裏を確認して下さい。
- 膝を軽く曲げ、膝蓋骨（お皿）の外側にシリコンパッドを沿わせませす。〔①〕
- 上下のベルトを内側から緩まないようしっかりととめていきます。〔②〕
- 外側偏位防止ストラップでシリコンパッドを抑え込むよう外側から内側方向へ少しきつめにとめます。〔③〕

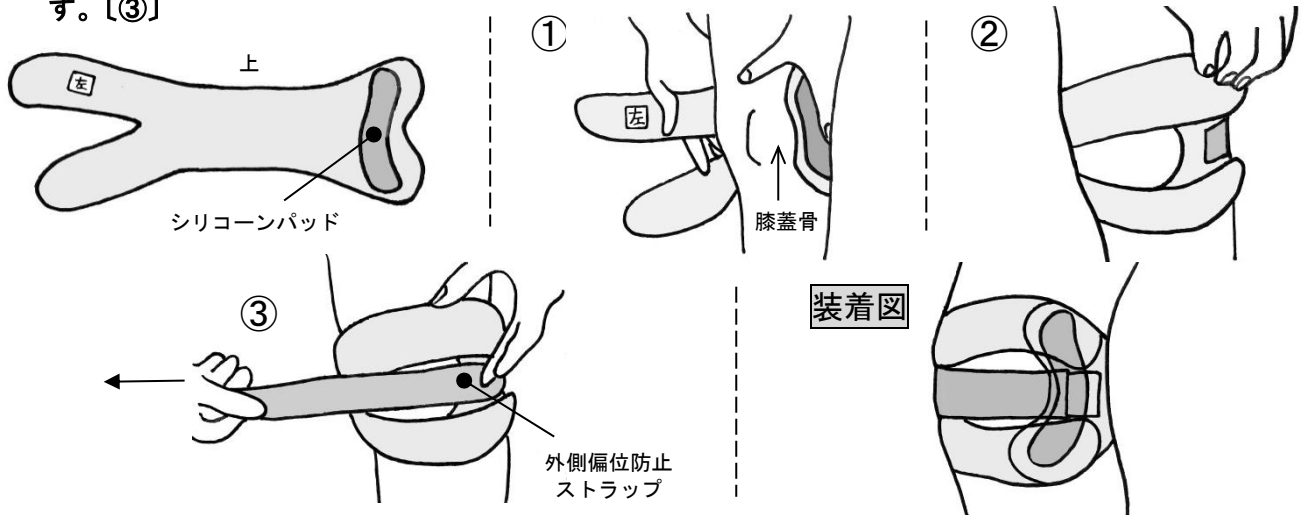

洗濯について

- 必ず本体からシリコンパッドを外し、中性洗剤で手洗いして下さい。
- よく水気を切り、陰干しして下さい。
- シリコンパッドは中性洗剤で手洗いし、タオル等でしっかりと水分を拭き取ります。
- 漂白剤、乾燥機は使用しないで下さい。

※改良のため予告なく仕様を変更することがあります。

取扱義肢装具製作所

製造・発売元

世界遺産 石見銀山

 **中村 ブレイス 株式会社**

本社/〒694-0305 島根県大田市大森町ハ132

TEL (0854) 89-0231 (代) FAX (0854) 89-0018

東京事務所/〒158-0097 東京都世田谷区用賀1-10-3

世田谷ビジネススクエア ヒルズⅡ 2F-25号

TEL (03) 3709-9361 FAX (03) 3709-9362